

PROCEDURE DE REMISE EN ETAT DES PLATEAUX INFORS EQUIPES D'ADHESIF

(APPLICABLE AUX PLATEAUX DE PLUS DE DEUX ANS)

1/ DECOLLER TOUTES LES BANDES ADHESIVES.




2/ NETTOYER LE PLATEAU A L'EAU ADDITIONNEE D'UN DETERGENT NEUTRE.


3/ RINCER ABONDAMMENT A L'EAU ET SECHER LE PLATEAU.

4/ PASSER DE L'ACETONE SUR LES BANDES AVEC UN CHIFFON NON PELUCHEUX.

5/ DEMONTER LA POIGNEE.

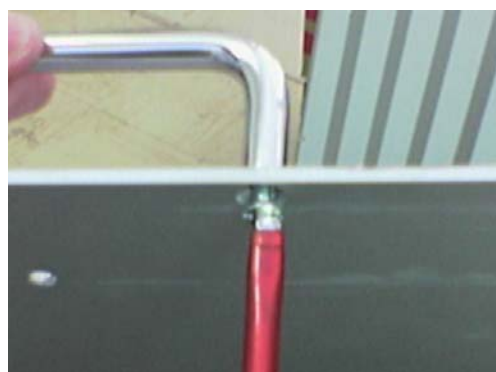


6/ A L'AIDE UNE PONCEUSE EXCENTRIQUE, PONCER DE FACON HOMOGENE (GRAIN UTILISE 80). LE BUT ETANT D'ELIMINER TOUTES TRACES D'ALUMINE.

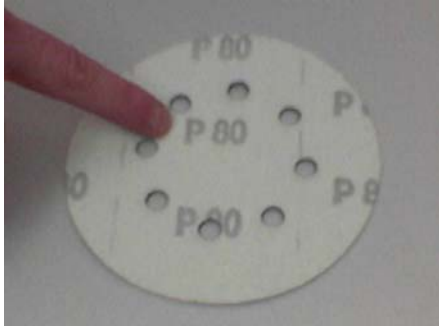


7/ NETTOYER LE PLATEAU A L'EAU ADDITIONNEE D'UN DETERGENT NEUTRE.

8/ RINCER ABONDAMMENT A L'EAU ET SECHER LE PLATEAU.

9/ APPLIQUER LES NOUVELLES BANDES ADHESIVES EN PRENANT SOIN DE NE PAS FAIRE DE BULLES D'AIR.

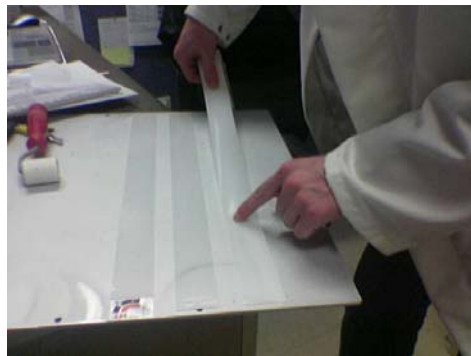

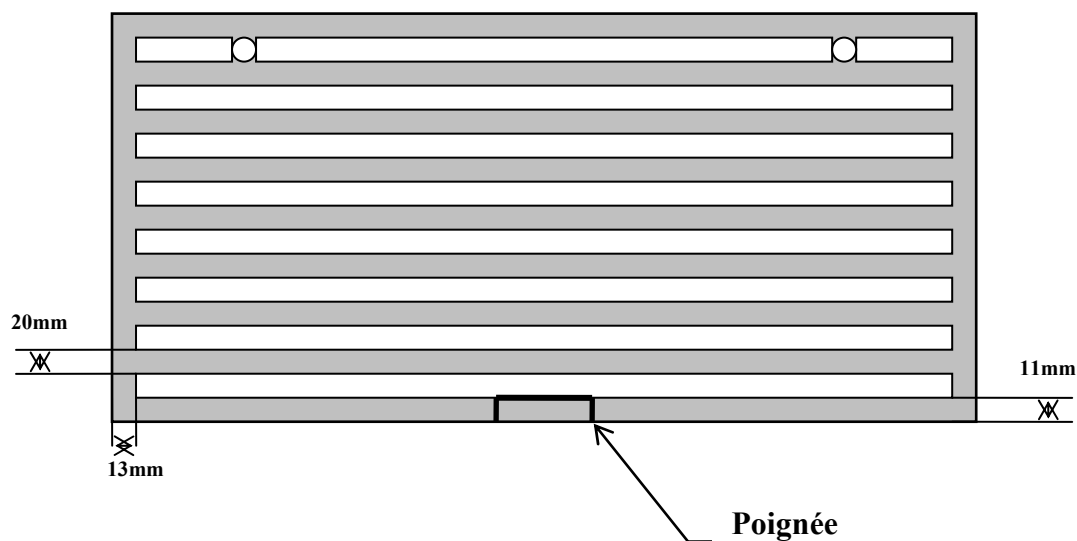

10/ UNE FOIS LES BANDES APPLIQUEES, PASSER LA ROULETTE POUR EXERCER UNE PRESSIION HOMOGENE.



11/ REMONTER LA POIGNEE.

NETTOYAGE MENSUEL DES BANDES ADHESIVES

1/ NETTOYER LE PLATEAU A L'EAU ADDITIONNEE D'UN DETERGENT NEUTRE.

2/ RINCER ABONDAMMENT A L'EAU ET SECHER LE PLATEAU.

3/ APRES LE SECHAGE, APPLIQUER DE L'ACETONE OU DE L'ALCOOL SUR LES BANDES ADHESIVES AVEC UN CHIFFON NON PELUCHEUX.